




Click'a2 [®]

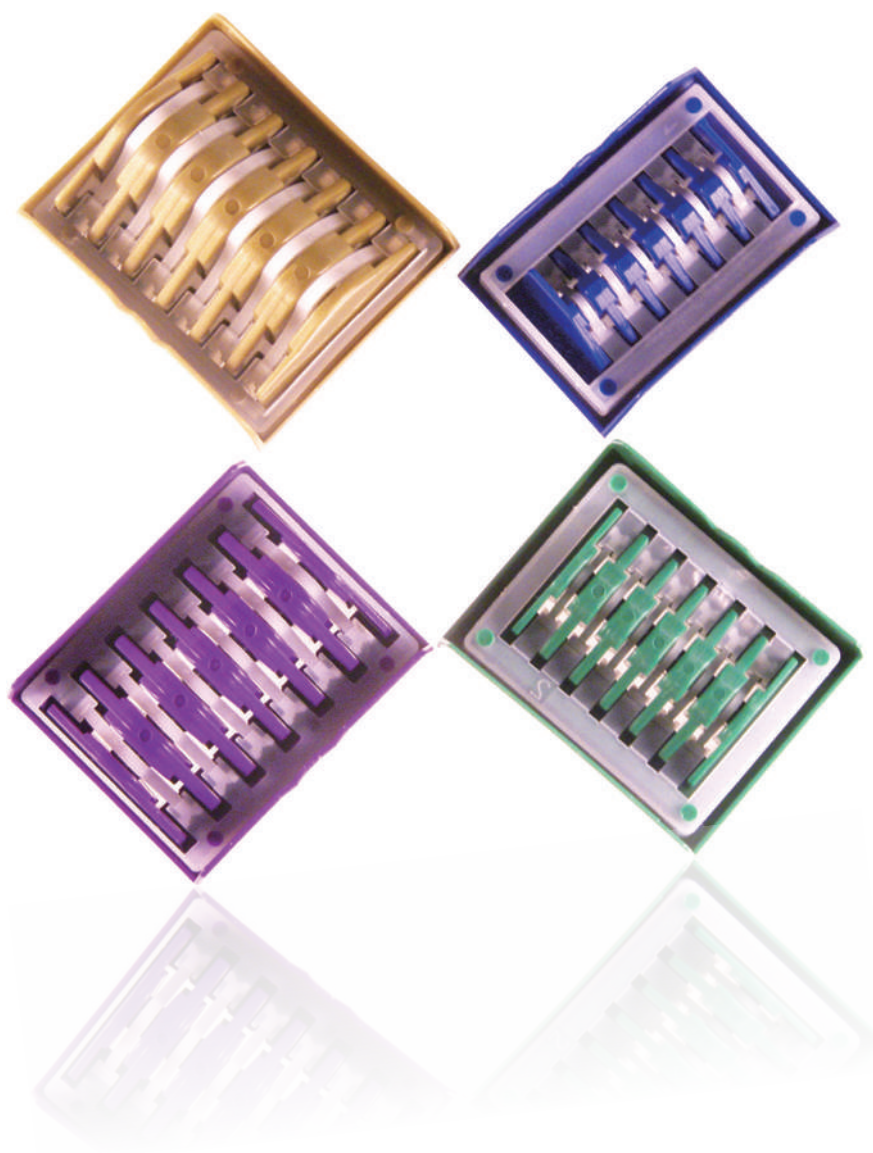



Polymer ligating clips Click'a V®

Click'aV Ligating Clipsは人体に埋込み可能な非吸収性ポリマー製です。安全使用に必要な生体適合性、体内留置後の構造的安定性を備えています。CTスキャン干渉が少なく、X線での放射線透過性もあり、MRI検査も安全に行うことが可能です。



Click'a V Ligating Clipsの特徴

- ・非吸収性のポリマー製、安定した結紮を実現
- ・リムーバによってクリップの取り外しが可能
- ・精巧な結紮面加工、歯状の突起により滑りを低減
- ・アプライヤへの装着時に手に伝わる感覚でクリップの確実な装填が可能
(※装填されていることを目視で確認してください)

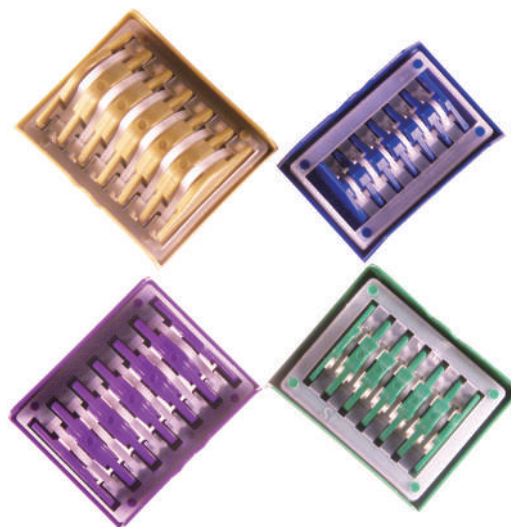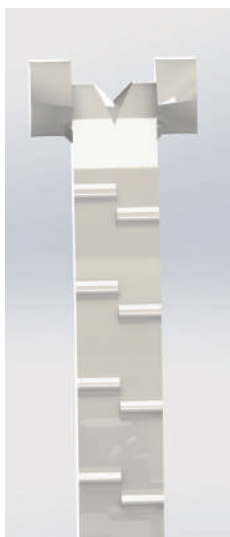

製品番号	サイズ	JANコード	カラー	クリップ数	入数
0301-03M	Size M	5060171288350	青	6	20 カートリッジ / 箱
0301-03ML	Size ML	5060171288367	緑		
0301-03L	Size L	5060171288374	紫		
0301-03XL	Size XL	5060171288381	茶		

Endoscopic Click'a V® clip applier

Endoscopic Click'a V® clip applier の特徴

- ・ 様々な組織径に対応する M/ML/L/XL のサイズラインアップ
- ・ 安定感を追求したハンドル
- ・ シャフトが 360°回転するローテーションノブにより片手操作が可能
- ・ 洗浄フラッシュポートより容易に洗浄が可能
- ・ 非分解式デザインのためメンテナンスが簡単
- ・ Polymer ligating clips Click'a V® のカートリッジカラーに対応したサイズごとに異なるローテーションノブカラー



Straight

ストレート



20° Angle

20° アンゲル



45° Angle

45° アンゲル

Endoscopic Click'a V® clip applier (ストレート)

● Size M



製品番号	サイズ	JAN コード	有効長*	カラー	入数
0301-04MEN	Size M	5060171283164	レギュラー	青	1 本
0301-04MEBN	Size M	5060171288053	ロング		

*レギュラー 32cm ~ 33cm ロング43cm ~ 46cm

※有効長がロングタイプのハンドル部分は、Size L,XLと同じ形状となります。

● Size ML



製品番号	サイズ	JAN コード	有効長*	カラー	入数
0301-04MLEN	Size ML	5060171282952	レギュラー	緑	1 本
0301-04MLEBN	Size ML	5060171288060	ロング		

*レギュラー 32cm ~ 33cm ロング43cm ~ 46cm

※有効長がロングタイプのハンドル部分は、Size L,XLと同じ形状となります。


● Size L



製品番号	サイズ	JAN コード	有効長*	カラー	入数
0301-04LE	Size L	5060171288794	レギュラー	紫	1 本
0301-04LEB	Size L	5060171286769	ロング		

*レギュラー 32cm ~ 33cm ロング43cm ~ 46cm

● Size XL

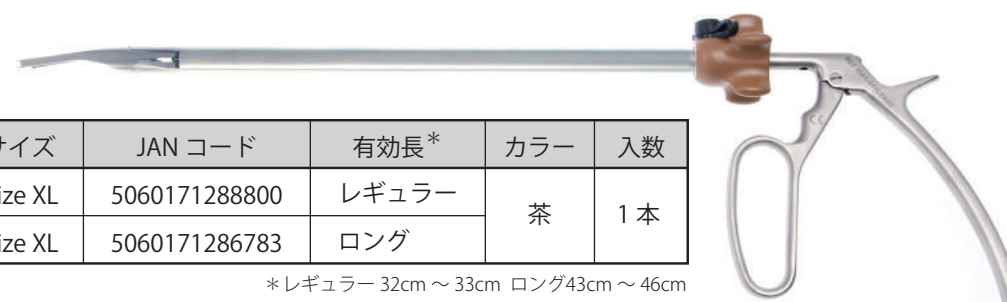

製品番号	サイズ	JAN コード	有効長*	カラー	入数
0301-04XLE	Size XL	5060171288800	レギュラー	茶	1 本
0301-04XLEB	Size XL	5060171286783	ロング		

*レギュラー 32cm ~ 33cm ロング43cm ~ 46cm

Endoscopic Click'a V® clip applier (20°アングル)

● Size M



製品番号	サイズ	JAN コード	有効長*	カラー	入数
0301-04MEA20	Size M	5060171285748	レギュラー	青	1 本
0301-04MEA20B	Size M	5060171283867	ロング		

*レギュラー 32cm ～ 33cm ロング43cm ～ 46cm


● Size ML



製品番号	サイズ	JAN コード	有効長*	カラー	入数
0301-04MLEA20	Size ML	5060171286806	レギュラー	緑	1 本
0301-04MLEA20B	Size ML	5060171283881	ロング		

*レギュラー 32cm ～ 33cm ロング43cm ～ 46cm

● Size L

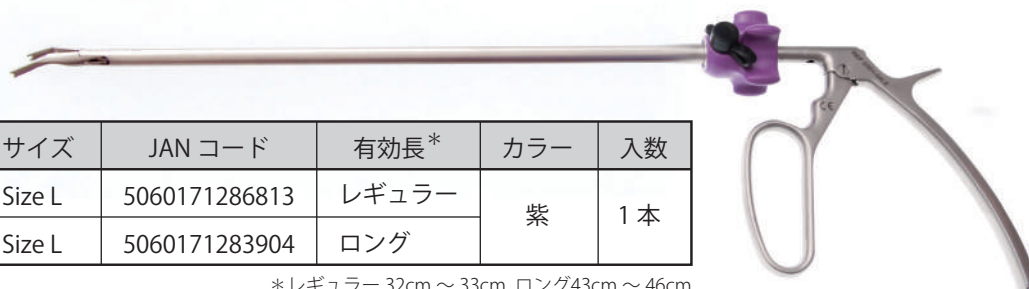

製品番号	サイズ	JAN コード	有効長*	カラー	入数
0301-04LEA20	Size L	5060171286813	レギュラー	紫	1 本
0301-04LEA20B	Size L	5060171283904	ロング		

*レギュラー 32cm ～ 33cm ロング43cm ～ 46cm

● Size XL



製品番号	サイズ	JAN コード	有効長*	カラー	入数
0301-04XLEA20	Size XL	5060171286820	レギュラー	茶	1 本
0301-04XLEA20B	Size XL	5060171283928	ロング		

*レギュラー 32cm ～ 33cm ロング43cm ～ 46cm

Endoscopic Click'a V[®] clip applier — GONZALEZ-RIVAS(45°アングル)

● Size M

製品番号	サイズ	JAN コード	有効長*	カラー	入数
0301-04MEA45	Size M	5060171284000	レギュラー	青	1 本

*レギュラー 32cm ~ 33cm



● Size ML

製品番号	サイズ	JAN コード	有効長*	カラー	入数
0301-04MLEA45	Size ML	5060171288930	レギュラー	緑	1 本


*レギュラー 32cm ~ 33cm



● Size L

製品番号	サイズ	JAN コード	有効長*	カラー	入数
0301-04LEA45	Size L	5060171288947	レギュラー	紫	1 本


*レギュラー 32cm ~ 33cm

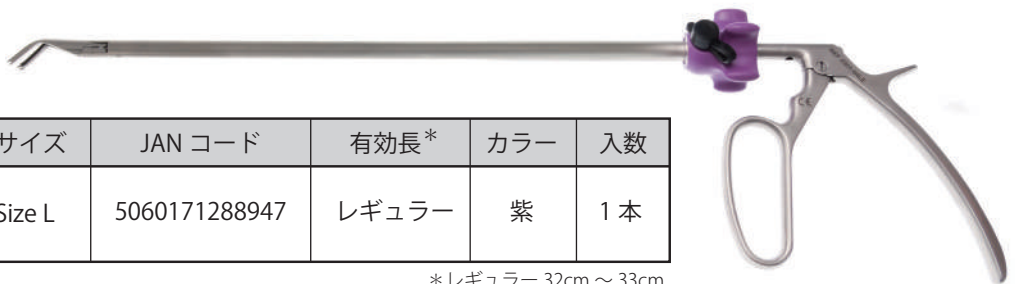

● Size XL

製品番号	サイズ	JAN コード	有効長*	カラー	入数
0301-04XLEA45	Size XL	5060171288954	レギュラー	茶	1 本

*レギュラー 32cm ~ 33cm

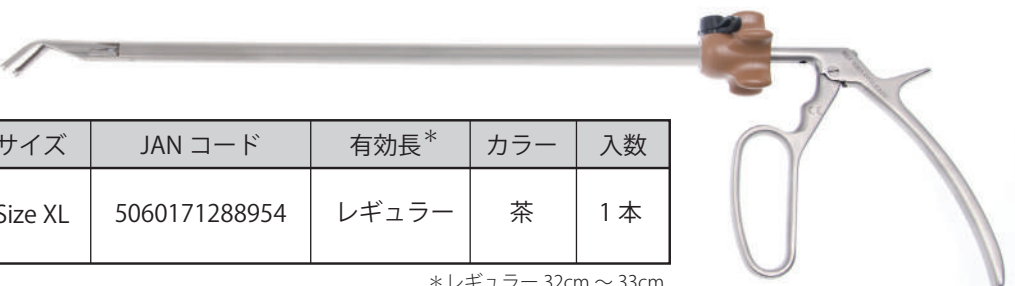

Click'aV® Clip Remover




製品番号	サイズ	JAN コード	有効長*	入数
0301-R804MLLE	Size M/ML/L 用	5060171286899	レギュラー	1 本
0301-R804MLLEB	Size M/ML/L 用	5060171286714	ロング	
0301-R804LXLE	Size L/XL 用	5060171286905	レギュラー	
0301-R804LXLEB	Size L/XL 用	5060171286691	ロング	

*レギュラー 31cm～33cm ロング43cm～45cm

販売名：GRENAクリップリムーバ 届出番号：27B1X001160GR002 一般的名称：クリップリムーバ

※各製品の正確なサイズにつきましては添付文書をご参照ください。

アプライヤへの装着方法

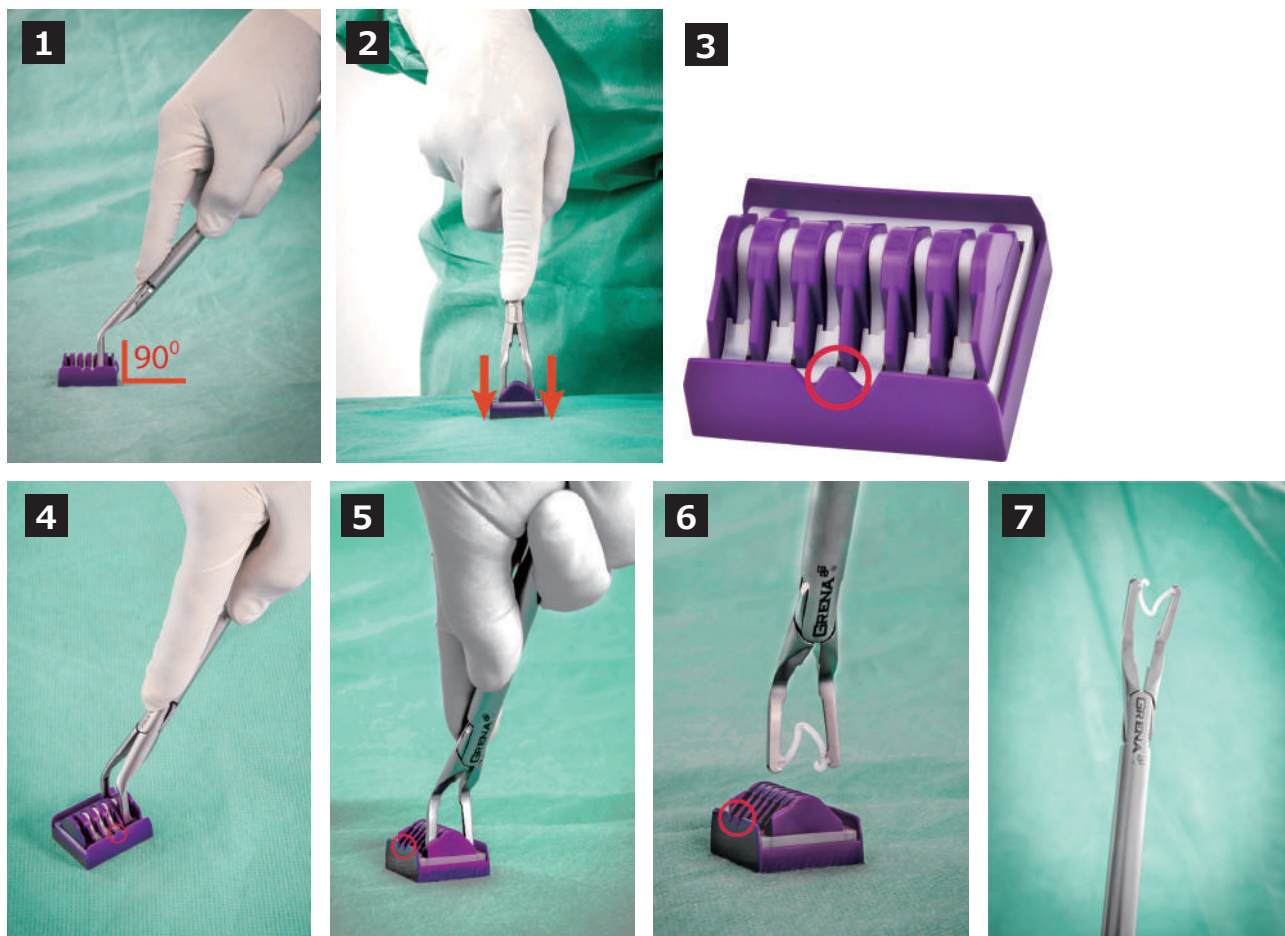

1. カラーコードにご注意ください。クリップカートリッジの色に対応した適切なアプライヤを選択してください。アプライヤのローテーションノブ部分の色がクリップサイズを示します。
2. クリップアプライヤのシャフト部分を把持してください。カートリッジに対してアプライヤのジョーが直角になるようにしてください。(写真 1)
3. 両方のジョーを同時にカートリッジに挿入するようにしてください。手元側にカチッという感覚が伝わり、クリップが確実に装着されたことを確認してください。(写真 2)
4. クリップングの際に視認性を担保する為、カートリッジ側面にある三角マーカが術者の左側を向くようカートリッジを設置してください。(写真 3,4,5,6)
5. クリップの装着が適切であることを確認してください。(写真 7)

販売元



エム・シー・メディカル株式会社

本 社 〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 12F TEL:03 (5715) 2800 (代) FAX:03 (5715) 2801
www.mcmed.co.jp



外国製造業者: Grena Ltd.
国 名: 英国

2403-1.2000