

ARC Wrist Tower

手関節用牽引器 アークリストタワー




Tower Features

- 垂直・水平方向の固定・牽引
- 2 手関節の掌屈位・背屈位の固定・牽引
- 3 手関節の掌側・背側へのスムースなアプローチ
- 4 X線透視装置のスムースな操作
- 5 管理、組立が容易な滅菌ケース付属

Key Indications:

- 手関節の鏡視下診断・処置
- 橈骨遠位端関節内骨折の診断・整復
- 舟状骨の整復・固定
- 尺骨短縮固定術



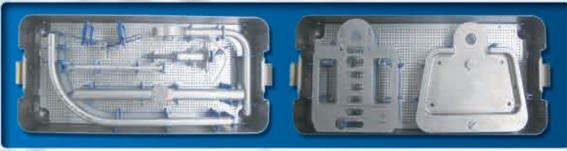

Tower In Action













William B.Geissler, M.D.とアキュメッド社により共同開発されたARCリストタワーは、180度可動するアーム、2つのジョイント、前腕部の固定により、手関節の垂直・水平、掌屈・背屈など様々な位置での固定、牽引を実現する手関節に特化した牽引器です。



TIPS AND PEARLS:

- 1.滅菌された本品の温度が十分に下がっていることを確認した後にご使用ください。
- 2.タワーベースのボルトを締める際は、用手的に軽く締めてください。
- 3.スプリングスケールを参考に、牽引する荷重を決定してください。
- 4.ベースプレート、スライディングフォアアームサポートに接触する部位にはタオルまたはパッドを置いてください。

Ordering Information

■ARCリストタワー

カタログ番号 品名

10100001 ARCリストタワー

■消耗パーツ

カタログ番号	品 名	規格	入 数	備考
10170051	フィンガートラップ	S	2	٦
10170052	フィンガートラップ	М	2	− 同サイズ×2個
10170053	フィンガートラップ	L	2	
10170060	アームストラップセット		3	ショート×2本 ロング×1本

販売名:アキュメッド リストタワー 医療機器届出番号:27B1X00116000217

製造元



アキュメッド社(米国)



■製造販売元

Next 日本メディカルネクスト株式会社

〒541-0042 大阪市中央区今橋2-5-8 トレードピア淀屋橋 TEL:06-6223-0602 FAX:06-6222-6181

札 幌 ☎011-622-4361 仙 台 ☎022-299-2371 東京☎03-5665-2780 関東☎048-652-3716 名古屋☎052-242-5201 大阪☎06-7670-1100 広島☎082-567-6661 福 岡☎092-522-2818